



BÓNG BÓP LAERDAL



Laerdal
helping save lives

Bóng bóp Laerdal



Trong suốt 35 năm, Bóng bóp Laerdal đã được khẳng định về chất lượng và hiệu quả. Được làm từ silicone và polysulfone trong suốt, thiết kế mới giúp gia tăng sự tiện dụng, tuổi thọ sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của cả nhân viên y tế và bệnh nhân.

An toàn

- Lắp ráp dễ dàng
- Đầu nối tiêu chuẩn: 15/22 mm
- Van một chiều: ngăn chặn không khí thở ra xâm nhập bóng
- Tích hợp van nạp và van chứa oxy trong một, cho phép sử dụng không khí xung quanh trong trường hợp cạn kiệt oxy
- Van điều áp 35cm H₂O giảm nguy cơ áp lực dương quá mức gây tổn thương phổi
- Van Bệnh nhân cho phép bệnh nhân tự thở hít oxy với trở kháng thấp
- Toàn bộ thành phần đều không chứa latex
- Chất liệu silicone và polysulfone trong suốt giúp dễ dàng quan sát

Hiệu quả

- Bóng bóp silicone, Van bệnh nhân, Van cấp khí cho phép phân phối không khí hiệu quả, mở rộng lại bóng nhanh chóng
- Khi sử dụng với túi chứa oxy, cung cấp oxy nồng độ cao ngay ở mức lưu lượng oxy trung bình

Kinh tế

- Tuổi thọ sản phẩm cao
- Có thể khử khuẩn mức độ cao hoặc tiệt khuẩn
- Van cấp khí, túi chứa oxy: giúp tiết kiệm oxy
- Có thể gấp gọn lại, tiết kiệm không gian lưu trữ
- Dễ dàng làm sạch để sử dụng

Mặt nạ bệnh nhân bao gồm: mặt nạ silicone và mặt nạ che

Mặt nạ silicone mềm mại mang lại sự thoải mái cho bệnh nhân

- Chất liệu và thiết kế giúp mặt nạ phủ kín
- Phù hợp với đầu nối 15/22 mm

Mặt nạ che giúp giữ mặt nạ Bệnh nhân đúng vị trí trong tình huống khó

Mặt nạ che được cung cấp kèm mặt nạ bệnh nhân cỡ 3/4 và 4/5+
Dễ dàng tháo/ lắp

Mặt nạ che và mặt nạ silicone đều có thể sử dụng nhiều lần, chịu được khử khuẩn mức độ cao



Mặt nạ che có thể được sử dụng như mặt nạ bổ sung, hoặc để gắn chặt Bóng bóp với khuôn mặt bệnh nhân khi thông khí bằng bóng bóp.
Dây đeo đầu tùy chọn



Trẻ sơ sinh



Phù hợp với bệnh nhân dưới 2.5 kg




Trẻ em



Phù hợp với bệnh nhân từ 2.5 kg đến 25 kg



Người lớn

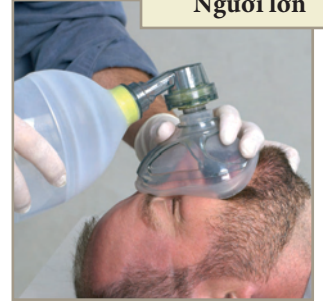

Phù hợp với bệnh nhân trên 25 kg



Van điều áp 35cm H2O

Có ở bóng bóp trẻ em và trẻ sơ sinh

Van Bệnh nhân

Van một chiều cung cấp không khí từ bóng bóp tới Bệnh nhân, không cho chiều ngược lại

Đầu nối linh hoạt

giúp tháo tác từ mọi hướng




Mặt nạ Bệnh nhân/Mặt nạ che

Trong suốt để dàng quan sát mũi miệng bệnh nhân

Bóng bóp silicone

Đàn hồi khôi phục hình dạng tốt ở các nhiệt độ khác nhau
Cảm nhận tốt đáp ứng của bệnh nhân

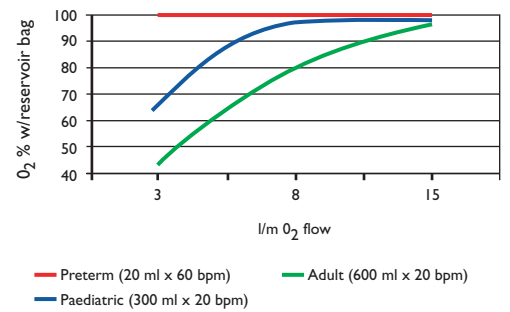

Trở kháng thấp


Van bệnh nhân được thiết kế để bệnh nhân thở tự nhiên
hít được 100% oxy với trở kháng tối thiểu

Van cấp khí

Thiết kế cung cấp hiệu suất an toàn và hiệu quả

Ít bộ phận dễ dàng làm sạch

Tích hợp van chứa và van nạp oxy trong một, cho phép sử dụng có hoặc không có túi chứa oxy

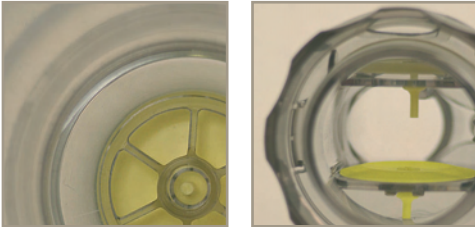

Nhãn riêng

Bạn đã tìm kiếm Bóng bóp của bạn?

Không cần phải tìm thêm nữa! Dán nhãn riêng với dịch vụ EMS, cơ sở hoặc bộ phận tên của bạn trên khớp nối cổ của Bóng bóp Silicone Laerdal của bạn giúp ngăn ngừa mất mát hoặc trộm cắp.

Không có chi phí bổ sung với số lượng mua tối thiểu. Xem đại diện Laerdal của bạn để biết chi tiết.



Khử trùng

Có thể sử dụng các phương pháp sau:

- Hấp tiệt trùng 132°-137°C.
- Cidex Glutaraldehyde
- Cidex OPA
- Sodium Hypo - Chlorite

Ống mở rộng Silicone

Ống mở rộng Silicone (tùy chọn) cho phép sử dụng khi di chuyển và giảm nguy cơ trật tuột ống nội khí quản bằng cách cho người cứu hộ linh hoạt trong quá trình thông khí.

